


Bezpieczne i wygodne mocowanie pomp

medima

Stacje dokujące

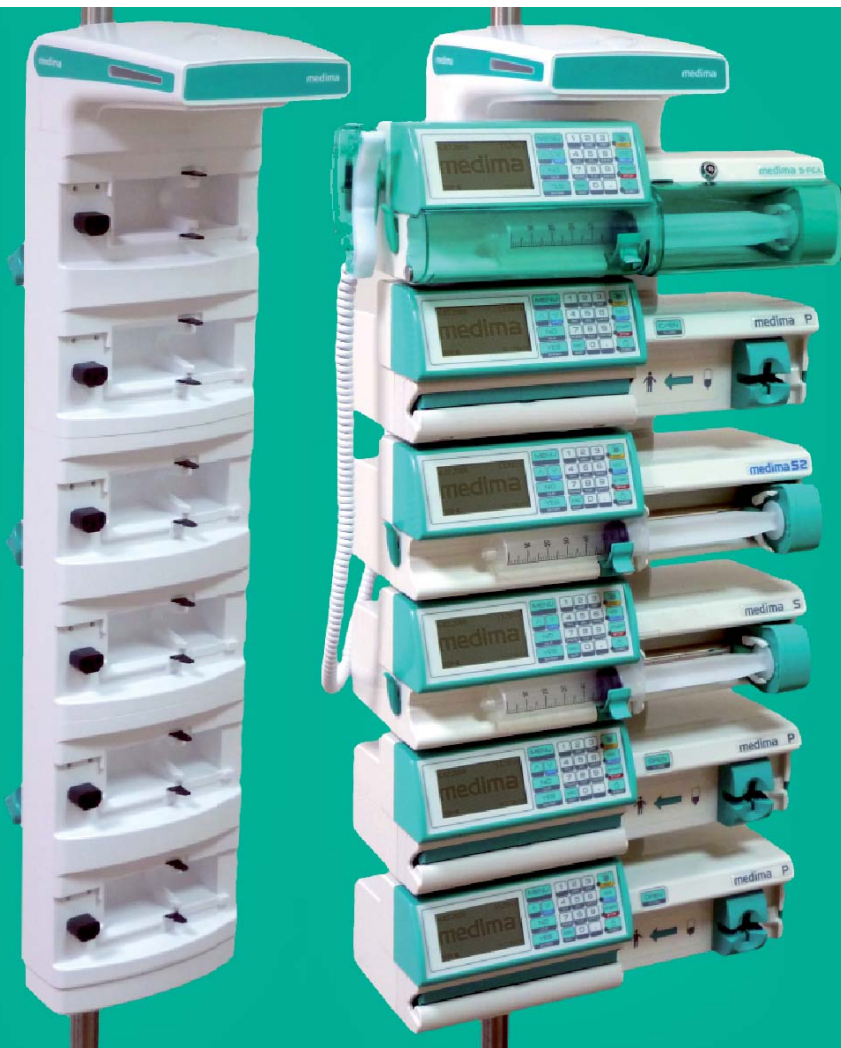

DS102/104/106/108
DS202/204/206/208
DS302/304/306/308

Dostępne modele umożliwiają mocowanie 2, 4, 6, 8 pomp strzykawkowych lub objętościowych.

Możliwość rozbudowy stacji mniejszych o dodatkowe moduły.

Typ DS10x - model podstawowy

Typ DS20x - model ze świetlną sygnalizacją alarmową

Typ DS30x - model ze świetlną sygnalizacją alarmową i możliwością podłączenia pomp do systemu monitorującego MedimaNet poprzez sieć LAN/WLAN

Umożliwiają szybkie i łatwe zainstalowanie pomp z automatycznym podłączeniem do zasilania oraz portów komunikacyjnych bez konieczności użycia dodatkowych kabli.

Dane techniczne:

Zasilanie	100 - 240V AC, 15W +25 W dla każdej pompy
Wymiary w mm (szer. /wys. /gł.)	DS102/DS202/DS302: 205 x 345 x 250 DS104/DS204/DS304: 205 x 580 x 250 DS106/DS206/DS306: 205 x 815 x 250 DS108/DS208/DS308: 205 x 1050 x 250
Waga w kg	DS102/DS202/DS302: 1,8 DS104/DS204/DS304: 3,0 DS106/DS206/DS306: 4,2 DS108/DS208/DS308: 5,4

Mocowanie	Do pionowych kolumn o średnicy 20-36 mm, wytrzymałość kolumny musi uwzględniać wagę zestawu.
Klasyfikacja	Klasa ochrony I, IP22
Zgodność	PN-EN60601-1, PN-EN60601-1-2 MDD93/42/EEC-I (DS10x, DS20x) MDD93/42/EEC-IIb (DS30x)

Stacja Dokująca Karetkowa DSA



- Pozwala na szybkie i bezpieczne mocowanie pomp w karetkach (bez konieczności użycia dodatkowych kabli przyłączeniowych).
- Umożliwia automatyczne podłączenie do zasilania DC.
- Zabezpiecza pompę przed skutkami drgań i uderów występujących w karetkach.

Dane techniczne:

Zasilanie	12–16 V DC, max 1 A z pompą
Mocowanie	Do ścian karetki
Wymiary w mm (szer./wys./gł.)	372 x 180 x 158.5
Waga w kg	1,6
Zgodność	PN-EN60601-1, PN-EN1789, MDD93/42/EEC-I

Uchwyt TP2



- Umożliwia szybkie mocowanie i łatwy transport dwóch pomp jednocześnie.
- Podłączenie do sieci za pomocą jednego kabla zasilającego.
- Prosta i lekka konstrukcja pozwala na szybkie mocowanie do statywu.

Dane techniczne:

Zasilanie	100 – 240, 50/60Hz, max 2A
Wymiary w mm (szer./wys./gł.)	210 x 215 x 65
Waga w kg	0,5
Zgodność	MDD93/42/EEC-I

Statyw do stacji dokujących i pomp ST01

Do mocowania stacji dokujących i pomp

- Stabilna konstrukcja zapewnia wygodne i bezpieczne mocowanie stacji dokujących i pomp.
- Umożliwia bezpieczny transport zestawów infuzyjnych (stacja dokująca z pompami).

Dane techniczne:

Wymiary w mm (szer./wys./gł.)	480 x 1560 x 530
Waga w kg	15
Maksymalne obciążenie w kg	35



ST01

Statyw do pomp SM1

- Lekki i stabilny, przeznaczony do mocowania i transportu pomp (do trzech sztuk).
- Dostępne są wersje z zasilaniem do pomp oraz bez zasilania.
- Regulowana wysokość w zakresie 130 – 225cm.

Dane techniczne:

Wymiary w mm (szer./wys./gł.)	600 x 1950 x 600
Waga w kg	7
Maksymalne obciążenie w kg	15



SM1

medima

Medima Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
tel. +48 (22) 313 22 66; fax +48 (22) 313 22 69
e-mail: medima@medima.pl, www.medima.pl